



L'agitatore per micropiastre ad alta velocità



Agitazione ad alta velocità di un massimo di 48 micropiastre

L'agitatore per micropiastre ad alta velocità offre un'agitazione ad alta velocità variabile da 600 a 2.500 rpm per micropiastre, piastre a pozzetti profondi e microtubi fino a 12,7 cm di altezza.

Caratteristiche uniche:

- Alla robusta superficie della piastra regolabile è possibile fissare fino a 48 micropiastre, 6 piastre a pozzetti profondi o microtubi di altezza inferiore a 12,7 cm, per un peso massimo di 3,2 kg.
- Per campioni difficili da miscelare, o per evitare il surriscaldamento dei campioni durante l'agitazione, la funzione di impulso programmabile consente di regolare i tempi di invio dell'impulso da 1 a 59 secondi.
- Grazie ai LED indipendenti e al touchpad di controllo per velocità e tempo, è possibile riprodurre con precisione le impostazioni in ogni momento.

L'agitatore per micropiastre ad alta velocità

Modello	SHHSMPDG
Movimento	Orbitale, 3,6 mm
Gamma di velocità	600 rpm–2,500 rpm
Timer	da 1 secondo a 160 ore
Controllo	Digitale
Comunicazione	RS-232
Portata	48 micropiastre
Dimensioni d'ingombro (L x P x A)	32,5 x 39,4 x 30,5 cm
Dimensioni del vassoio incluso (L x P)	31,1 x 27,9 cm
Peso netto	21,8 kg
Alimentazione elettrica	230V, 50/60Hz
Consumo de energía	120 W
Entorno de trabajo	4 °C – 40 °C, 20% – 80% RH*, non condensante

*RH = Umidità relativa

Altre caratteristiche e dotazioni standard


Alluminio pressofuso, La funzione di impulso programmabile consente di regolare i tempi di invio dell'impulso da 1 a 59 secondi. È possibile programmare il timer per il conto alla rovescia dal tempo impostato, e l'unità si spegne quando il timer raggiunge lo zero, oppure si può optare per il funzionamento in modalità continua, in cui il timer conta il tempo accumulato fino a quando l'utente spegne l'unità.

Conformità

- **Sicurezza prodotto:** IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-051
- **Compatibilità elettromagnetica:** IEC/EN 61326-1 Classe A, Basic Environments
- **Marchi di conformità:** CE; RCM; TÜV SÜD; WEEE

Dimensioni

SHHSMPDG

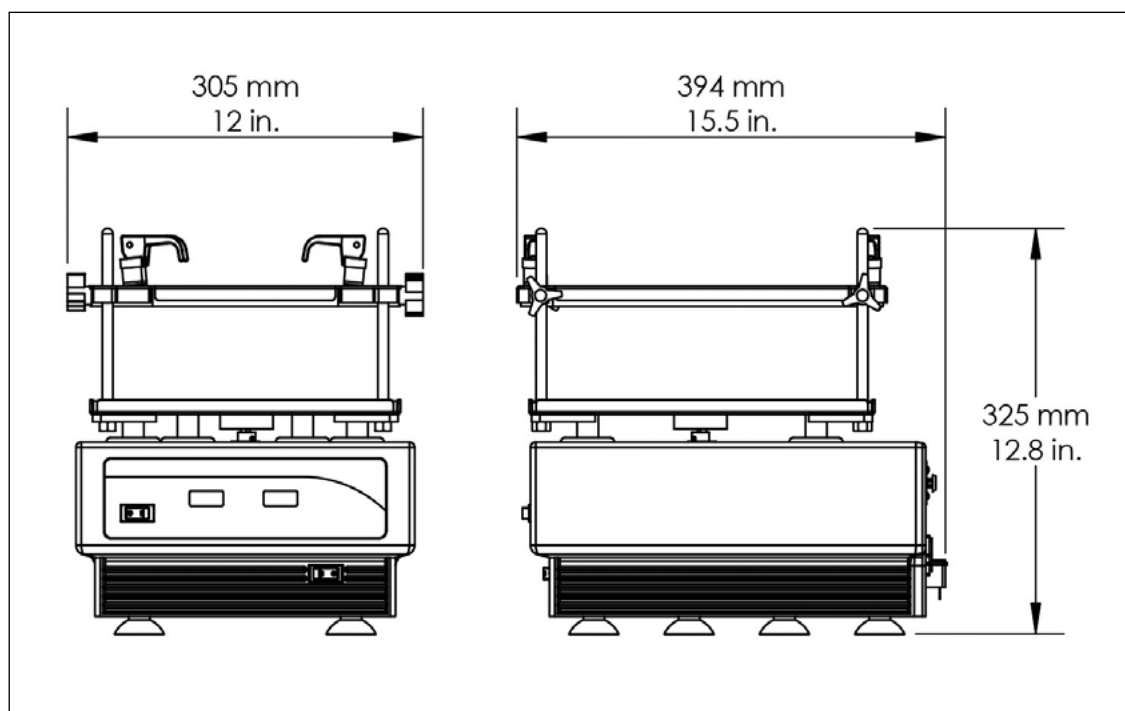

OHAUS Europe GmbH

Heuwinkelstrasse 3,
8606 Nänikon,
Svizzera

E-mail: ssc@ohaus.com
Tel.: +39 02 38 591 323
E-mail: tsc@ohaus.com
Tel.: +39 02 38 591 324
www.ohaus.com

Il sistema di gestione che regola la produzione di questo prodotto è certificato ISO 9001:2015.

