

La **Linea Gemina** è un sistema modulare d'arredo in cui ogni modulo funge da unità indipendente autoportante. Il banco è costituito da fianchi a "C" in acciaio spessore 40/10 e traversi in acciaio 80x20. La scelta di questa sezione di tubolare permette di garantire una tenuta eccellente e evitare flessioni o eccessivi sforzi del piano di lavoro.

La verniciatura utilizzata è una verniciatura a polveri epossidiche con spessore 80 micron e passaggio in galleria termica a 200°C. Ciò consente di ottenere un'ideale resistenza a eventuali attacchi e un'ottima durata dei materiali. La colorazione standard proposta da Premax per la Linea Gemina è RAL 7000 bucciato per le componenti verticali e RAL 9006 per quelle orizzontali. Sono disponibili altre colorazioni a richiesta.

Nella zona posteriore del banco sono previsti nr. 2 pannelli di tamponamento. A livello strutturale, questi elementi permettono di annullare l'oscillazione orizzontale del modulo aumentandone pertanto la stabilità. I moduli sono sempre dotati di queste pannellature, sia in presenza di mobiletti sottobanco, che in corrispondenza di eventuali vani a giorno. Uno dei due pannelli, inoltre, è removibile e permette l'accesso al vano tecnico posteriore, dove è possibile predisporre gli allacciamenti alle reti esistenti.

Le pannellature sono realizzate in nobilitato sp. 19 mm bordato ABS 3 mm.



I banchi Gemina possono essere dotati di pannellatura frontale porta utenze. A seconda delle esigenze questa pannellatura può essere configurata inserendo diverse utilities:

- Prese elettriche (trivalenti, italiane, UPS, ecc.)
- Prese dati / telefono
- Rubinetti gas /gas tecnici con attacco rapido
- Vaschette sgocciolatoio con erogazione acqua

Rimane sempre possibile effettuare implementazioni o modifiche.

Le mensole della Linea Gemina sono regolabili in altezza attraverso un sistema di scorrimento su tubi in acciaio inox. Ciò permette di evitare l'utilizzo della cremagliera che costituisce un punto di difficile verniciatura e anche un ricettacolo di sporcizia. La regolazione è disponibile anche per l'altezza del pensile qualora si opzionasse la soluzione con pensile.




Norma di riferimento: UNI EN 13150:2003

Banchi da lavoro per laboratorio. Dimensioni, requisiti di sicurezza e metodi di prova.


Par. 4 - Dimensioni	App. A.3.5 - Prova di stabilità all'urto orizzontale di banchi da lavoro singoli
Par. 5 - Requisiti generali di sicurezza	App. A.3.6 - Prova di stabilità con carico verticale dei banchi da lavoro singoli
App. A.3.1 - Prova di carico statico orizzontale	Par. 7 - Informazioni per l'utilizzatore
App. A.3.2 - Prova di carico statico verticale	Par. 8 - Marcatura ed etichettatura
App. A.3.4 - Flessione delle mensole del banco da lavoro	

La Linea Gemina è disponibile nei moduli standard 60 - 90 - 120 - 150 - 180, ma anche in soluzioni a misura. Gli ingombri sono specificati nella pagina seguente.



ALZATA A FILO PIANO

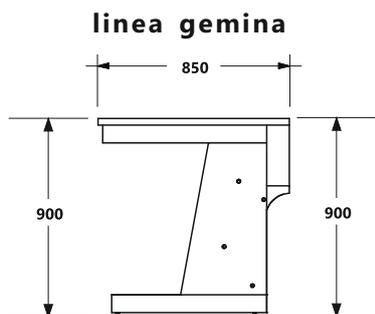



linea gemina S

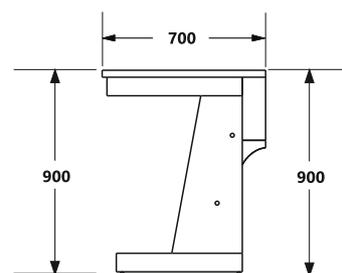



ALZATA BASSA

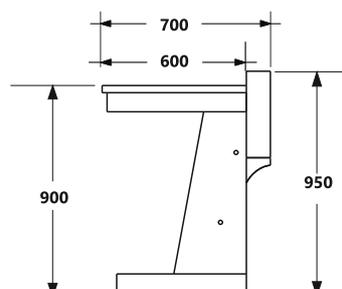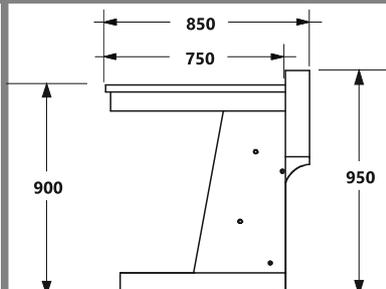



ALZATA MEDIA

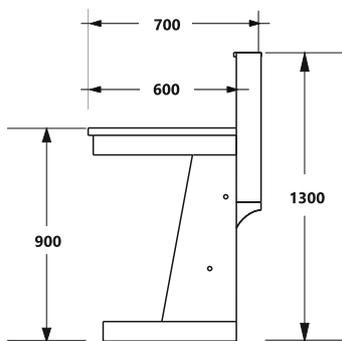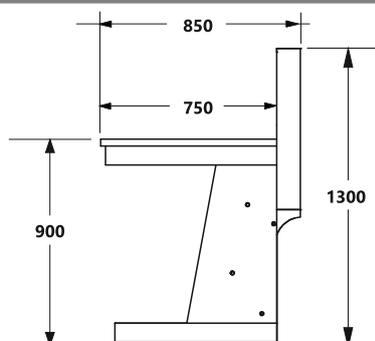

**ALZATA ALTA CON
MENSOLE**

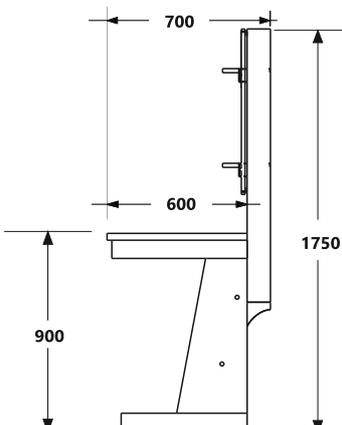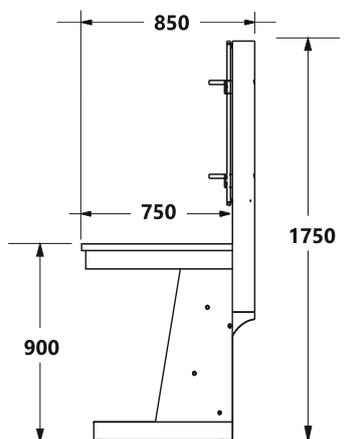

**ALZATA CON UNA
MENSOLA E PENSILE**

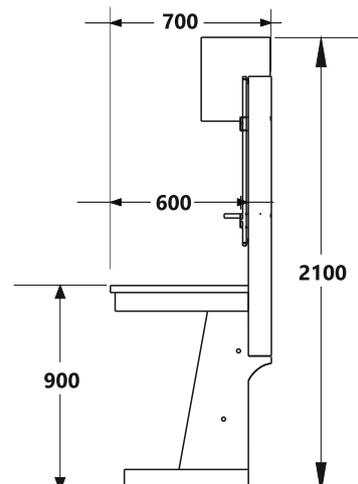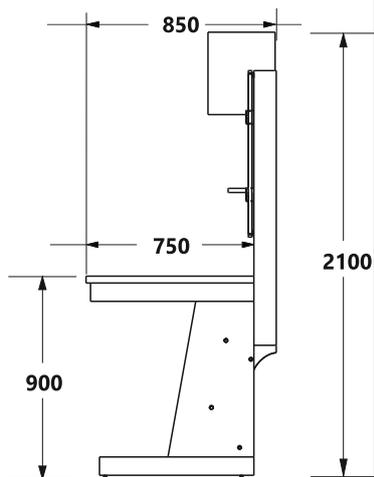

Nella realizzazione dei banchi centrali, la Linea Gemina prevede l'accoppiamento di due banchi completi. Ciò permette di garantire al Cliente la massima flessibilità. Tali banchi possono infatti essere separati ed eventualmente riposizionati a parete senza interventi di adattamento aggiuntivi.

